

Offrite ai vostri
pazienti una
riabilitazione
ottimale



GRPRO 2.1

Crioterapia dinamica

GAME READY ha rivoluzionato il trattamento nella riabilitazione post-operatoria e nella traumatologia grazie all'applicazione di una fonte regolata e costante di crioterapia compressiva.



FREDDO COSTANTE E CONTROLLATO

Raffreddamento immediato, controllato (da 1° C a 10°C) e uniforme per un'analgisia rapida su tutta l'area di trattamento.



COMPRESSIONE ATTIVA

Compressione attiva: freddo profondo, analgesia duratura, stimolazione linfatica e sanguigna.



BUSTE CIRCONFERENZIALI

Perfettamente adattato a tutte le parti del corpo per un recupero ottimale: distribuzione del freddo e della compressione.



PROTOCOLLI STABILITI

Istruzioni dettagliate per l'uso: trattamento, temperatura, pressione, valutazione e monitoraggio della ferita.



CE MEDICALE

L'unico dispositivo medico in Europa ad essere validato e sicuro, con studi scientifici a sostegno.



STUDI CLINICI

Game Ready é l'unico dispositivo come riferimento negli studi sulla crioterapia compressiva post-operatoria.

SCIENTIFICAMENTE PROVATO

Les vertus du GRPRO 2.1

- › Ridurre significativamente l'assunzione di farmaci antidolorifici
- › Favorire l'apporto di ossigeno a livello cellulare
- › Ottimizzare la cicatrizzazione dei tessuti
- › Migliorare la funzione linfatica

Il GPRO 2.1 genera un freddo circonferenziale e perfettamente omogeneo su tutta l'area trattata, rendendolo estremamente confortevole e sicuro. Le virtù terapeutiche del freddo intenso sul paziente alleviano il dolore e favoriscono la circolazione per ridurre gli ematomi in seguito di shock traumatici.

ANTI DOLORE ISTANTANEO

Poiché il freddo é immediato (0°C in 6 secondi) e uniforme, l'effetto analgesico é rapido e si estende a tutta l'area trattata. La compressione aumenta la penetrazione del freddo in profondità nei tessuti, prolungando l'analgesia del paziente anche dopo l'interruzione del trattamento.

Patrick Mangin, kinesiterapeuta di Toulouse, ha dichiarato: “ Ad esempio, i pazienti affetti da periartrite alla spalla sono riuscito a dormire meglio e a trovare un conforto di vita migliore, dopo 2-3 sedute di 20-30 minuti ciascuna”

Le GRPRO 2.1 riduce notevolmente la quantità di farmaci (come gli oppiacei) somministrati ai pazienti. I nuovi protocolli recentemente messi in atto dall'équipe Clinica des Cèdres di Cornebarrieu (1'000 interventi all'anno) si spingono ancora più il là, dal momento che i cateteri femorali sulle PTG sono stati eliminati per un indice di dolore (VAS) vivino a 0.

CONTROLLO DELL'INFIAMMAZIONE E ANTIEDEMA

Il trattamento GRPRO 2.1 controlla tutti i fenomeni infiammatori, mentre la compressione attiva (regolabile e intermittente) stimula i circuiti linfatici e sanguigni. In questo modo, tutte le conseguenze di un trauma acuto (edema, gonfiore, ematomi, ecc!..) vengono trattate con questa doppia azione, che rende Game Ready unico in termini terapeutici.

“ Da oltre un anno abbiamo integrato l'uso di Game Ready nei nostri processi di recupero rapido dopo l'intervento chirurgico, per ridurre il dolore e la comparsa di ematomi ed edemi. Abbiamo ridotto in modo significativo la durata media della degenza e abbiamo eseguito gran parte degli interventi in regime ambulatorio (30%) “. ROMAIN DOMPS Direttore della clinica Domont in Val D'Oise

ACCELERARE LA RIABILITAZIONE

Che si tratti di traumatologia sportiva o di trattamento post-operatorio, sia i pazienti che i terapisti riferiscono che Game Ready ha permesso loro di recuperare più velocemente e di tornare alle competizioni, all'attività fisica o semplicemente al lavoro.

L'étude clinique (multisites 400 patients) publiée récemment dans le Bristish Journal a permis de mettre en évidence une corrélation significative entre l'utilisation du Game Ready (vs. technique de glaçage et de compression statique) et une amélioration beaucoup plus rapide des capacités fonctionnelles des patients.



GAME READY®, IL DISPOSITIVO MEDICALE DI RIFERIMENTO.



Il dispositivo post -
operatorio immediato
**preferito dai
chirurghi**



Popolare con
+ 150'000 pazienti
all'anno

Trovate studi e protocolli
Game Ready sulla nostra
piattaforma :





Più di 1'500 chirurghi raccomandano Game Ready ai loro pazienti post-operatorio

“ Il dispositivo di crio e compressione attiva Game Ready é diventato una parte indispensabile della cura post-operatoria immediata. Questo dispositivo offre ai miei pazienti comfort e qualità nel trattamento del dolore, dell'infiammazione e della riduzione dell'edema. “

Professore Etienne Cavaignac,
Univerità dello sport
CHU Purpan, Clinique



3000 fisioterapisti utilizzano Game Ready nelle cure post-operatorie e post-trauma

“ Abbiamo ottenuto ottimi risultati in reumatologia, traumatologia e algoneurodistrofia. Dopo 2-3 sedute di 20-30 minuti, i pazienti si sentono a proprio agio e possono dormire di nuovo. Grazie alla sua facilità d'uso, i pazienti sono autonomi e possono effettuare da soli la sessione di fraddo, in base all'indicazione della pressione distillata. Lo utilizziamo per un periodo di 20-30 minuti per alleviare il dolore “.

Patrick MANGIN (fisioterapista)



98% dei clienti sono soddisfatti del fatto che il loro fisioterapista e il loro medico abbiano suggerito Game Ready

“ GAME READY mi ha permesso di riacquistare più rapidamente sensazioni migliori ed é stato un grande vantaggio per il mio recupero post-operatorio. Consiglio agli atleti di alto livello di utilizzarlo per almeno un mese, pre^êrché mi ha permesso di riprendere la riabilitazione più rapidamente e senza complicazioni. Per i pazienti che non sono soggetti alle esigenze di uno sport di alto livello, una cura di quindici giorni mi sembra un grande vantaggio in termini di sollievo dal dolore e di recupero della mobilità ”.

Vincent Clerc (Rugby)

MED4ELITE

Terapia di contrasto

Il sistema multimodale ed4lit di Game Ready per due utenti, combina crioterapia senza ghiaccio, termoterapia, terapia di contrasto rapida e compressione attiva, in un unico rivoluzionario sistema di recupero per traumi e trattamenti post-operatori

L'uso del dispositivo in grado di generare freddo e calore, come Med4Elite, offre benefici reali in tutte le fasi del processo di guarigione. Il calore viene generalmente utilizzato per le lesioni croniche. Il calore riduce il tono muscolare e articolare. Il freddo, invece, viene utilizzato in situazioni acute (infiammazione, gonfiore e dolore) perché allevia il dolore (ad esempio su un tendine). I trattamenti caldi e freddi sono quindi adatti a un'ampia gamma di patologie. Inoltre la compressione offerta dai dispositivi Game Ready accelera il drenaggio e l'eliminazione delle tossine, contribuendo ad alleviare il dolore. La terapia di contrasto riduce il dolore e il gonfiore. Si applica alternando rapidamente il caldo e il freddo terapeutico.

Med4Elite è stato progettato per consentire variazioni di temperature rapide e regolabili grazie a fasce cosporee simili.



COMPRESSIONE
ATTIVA

TERMOTERAPIA
ATTIVA

CRIOTERAPIA
ATTIVA

TERAPIA DI
CONTRASTO

DUE PAZIENTI
SIMULTANEAMENTE

GAME READY® MIGLIORA LA RIABILITAZIONE

In un sondaggio
condotto su più di 9'700
pazienti, è emerso
che.....

96%

affermano che il GameReady
offre una migliore riabilitazione
post-operatoria rispetto al
trattamento criochimico utilizzato
in precedenza.

87%

dicono che il GameReady
li ha aiutati a ridurre l'uso
di antidolorifici o li ha
aiutati a interrompere
l'assunzione di farmaci.

98%

sono soddisfatti che il
loro fisioterapista o
medico abbia suggerito
GameReady come
opzione per la loro
riabilitazione.



MED ELITE™


GAME READY

LA COMPRESSIONE DINAMICA

La compressione dinamica esercitata attraverso le buste é regolabile (da 0 a 75 mmHg), graduale e intermittente. La compressione é uniforme su tutta l'area articolare/muscolare.

Questo permette di :

- › Amplificare la penetrazione del freddo in profondità nei tessuti
- › Esercita un effetto pompa drenante per accelerare il recupero dei circuiti linfatici e sanguigni
- › Perfettamente adatto all'articolazione

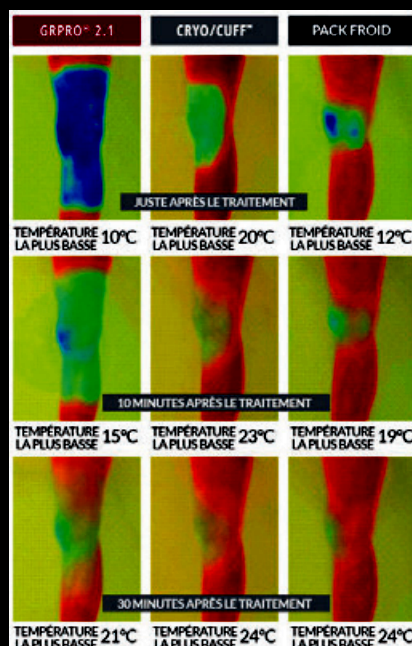

INVOLUCRO ANATOMICO PER OGNI ARTO

le buste hanno un effetto a doppia azione perché siôno composte da due elementi:

La parte tecnica a doppia camera (una di raffreddamento e una di pressione). La camera fredda é costituita da un circuito attraverso il quale circola l'acqua refrigerata (questo circuito abbraccia l'intera superfcie dell'involucro, in modo che il freddo sia diffuso e distribuito uniformemente in tutta l'area). La camera d'aria é alimentata da un compressore e regolata da un sistema di feedback che misura il livello di pressione nella camera. Questo processo consente una compressione e decompressione regolabile e progressiva.

Il rivestimento é completamente sfoderabile e lavabile in lavatrice

LA GAMMA DELLE FASCE

Sviluppato sulla base di un progetto della NASA, l'involucro a doppia camera GAMEREDY combina freddo e compressione in un modo unico per abbassare significativamente la temperatura corporea in modo uniforme su un'ampia area.

Il freddo penetra più profondamente e viene mantenuto più a lungo per ottenere risultati ottimali.



Per un recupero ottimale a domicilio

CONTATTACI
PER IL VOSTRO NOLEGGIO,
O PER I VOSTRI PAZIENTI

info@fisiorent.ch
www.fisiorent.ch
+41 (0) 79 297 19 52





WINBACK SWISS
Route Industrielle 2
1806 Saint-Légier-La Chiésaz
Suisse

+41 (0)21 925 00 00
hello.swiss@winback.com
www.winback.com

 **WINBACK**
BETTER FASTER GENTLER