



chattanooga®



IL VOSTRO SPECIALISTA NELLA RIABILITAZIONE

Brochure & prezzi

**RIABILITAZIONE**

**2025**

enovis



**GAMMA** 

# ELETTROTHERAPIA

---



**enovis**  |

FISIORENT Sagl- Via Marù 27- 6806 Sigrino - TI

[www.fisio rent.ch](http://www.fisio rent.ch)

[info@fisio rent.ch](mailto:info@fisio rent.ch)

+41 79 297 19 52





# WIRELESS PROFESSIONALE FULL

CHF 1099.00

- **LAVORO ATTIVO CON SOVRAPPOSIZIONE DI ELETTRO**
- **PROGRAMMI: RIABILITAZIONE I & II, TERAPIA DEL DOLORE I & II, VASCOLARE, PREPARAZIONE FISICA I & II, NEUROLOGIA**
- **TECNOLOGIA MUSCLE INTELLIGENCE™ 4 FUNZIONI DISPONIBILI SU OGNI MODULO PER UNA MAGGIORE PRECISIONE**
- **MULTI-SESSIONS™**
- **SENZA FILI**

## INFORMAZIONI PER LA COMANDA

2532119	WIRELESS PROFESSIONAL FULL
ACCESSORI STANDAR INCLUSI	
42204	Elettrodi Snap Dura-Stick "Plus Snap 50 x 50 mm (x 4)
42223	Elettrodi Snap Dura-Stick "Plus Snap 50 x 100 mm 1 Snap (x 2)
42203	Elettrodi Snap Dura-Stick "Plus Snap 50 x 100 mm 2 Snaps (x 2)
1494	Tours de cou Wireless Professional (Livré avec 2 tours de cou)
001136	Telecomunicazione Wireless Professional Full Multi-Sessions™ (Consegnato con 2 telecomandi)
601163	Cavo USB Wireless Professional
602048	Flacone gel 250 ml
649022	Adattatore EU Wireless Professional
680041	Valigetta trasporto Wireless Professional 4 CH
683159	Station d'accueil Smart Wireless Professional 4 CH Multi-Sessions™
980026	Penna ricerca punti motori+ flacone gel 100 ml
984350	Modulo di stimolazione Wireless Professional consegnato con 4 moduli
5529024	Copertura protezione telecomando Wireless Professional Bianco
5529220	Set di cavi a colori identificazione dei canali
5528535	Copertura protezione telecomando Wireless Professional Blu

## SPECIFICHE TECNICHE

NUMERO DI CANALI :	4
CORRENTE COSTANTE :	Fino a una resistenza massima di 1 300 Ohm/canal
INTENSITÀ MASSIMA :	120 mA
INCREMENTI :	0,25 mA
LARGHEZZA IMPULSI:	30 à 400 µ secondes
FREQUENZA:	1-150 Hz
CLASSE IP :	IP122
APPLICAZIONI :	Type BF conforme al test di sicurezza : IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, IEC 60601-2-10
ALIMENTAZIONE :	Lithium polymère (LiPo) rechargeable 3,7 (V)/ ≥ 1 500 (mAh).

Wireless Professional 4 CH è uno stimolatore wireless a 4 canali sviluppato per supportare le principali indicazioni dell'elettroterapia:

Standard (TENS/NMES) e Full (neurologia, ACL) con la libertà offerta dalla tecnologia wireless. L'assenza di cavi e la funzione Trigger consentiranno di realizzare nuove sedute progressive di elettroterapia, in particolare quando il medico desidera controllare manualmente la stimolazione.

Fornito con 4 moduli di stimolazione, 2 telecomandi e 1 stazione di ricarica avanzata (Smart 4 CH), il dispositivo consente di somministrare più sessioni contemporaneamente: Multi-Sessions™.

Configurazione dei programmi : Full - 4 CH - Multi-Sessions™.

### TECNOLOGIA SENZA FILI - WIRELESS

Eliminare ogni vincolo d'uso facilitando l'installazione del paziente e garantendogli al contempo una totale libertà di movimento. La tecnologia wireless consente di combinare l'elettroterapia con esercizi attivi che favoriscono l'efficacia delle sedute.

+ TENS

Numerose situazioni cliniche richiedono di combinare gli effetti terapeutici della TENS con qualsiasi altro trattamento.

Wireless Professional ti invita ad associare 2 programmi contemporaneamente per ottimizzare i benefici della seduta.

### FUNCTION TRIGGER

Attivazione volontaria e controllata della stimolazione quando richiesto in determinati protocolli (dorsiflessione del piede dell'empiegico, ecc.).

### SKIP

Consente di passare liberamente da una fase all'altra (riscaldamento, lavoro/riposo, recupero).

### PERSONALIZZAZIONE

Gestisci i tuoi elenchi di pazienti, le cronologie dei trattamenti e crea i tuoi programmi personalizzati.

### FORMA D'ONDA



• Bifase simmetrica  
100% compensata

**GARANZIA 3 ANNI**



### AUTONOMIA E RICARICA RAPIDA

Batterie integrate nei moduli e telecomando in litio polimero che consentono una ricarica continua e un'autonomia giornaliera di trattamento.

La stazione di ricarica consente una ricarica completa dei moduli in meno di 1h30.

### RISORSE CLINICHE INTEGRATE

Foto del posizionamento degli elettrodi, impostazioni e dettagli sul programma direttamente accessibili dal telecomando.

### MULTI-SESSIONE

Questi dispositivi sono forniti con 4 moduli, 2 telecomandi e 1 stazione di ricarica avanzata che consente di sincronizzare liberamente telecomandi e moduli per eseguire più sessioni contemporaneamente. Liberate la vostra attività non disponendo più di un unico stimolatore, ma di diversi moduli di stimolazione e telecomandi attivabili individualmente in base alle vostre esigenze. Telecomandi/moduli aggiuntivi opzionali.

### DIMENSIONI

TELECOMANDO :	105 x 66 x 19 mm
MODULO :	55 x 16 mm
STATION D'ACCUEIL SMART 4 CH :	265 x 240 x 200 mm



Télécharger le manuel d'utilisation du Wireless Professional Chattanooga®



Découvrez la vidéo du Wireless Professional Chattanooga®

## INFORMAZIONI PER L'ORDINE

### CODICE DESCRIZIONE

#### CHATTANOOGA® REHAB

2533110 Kit Chattanooga® Rehab

#### ACCESSORI INCLUSI

683010 Caricabatterie rapido

941213 Batteria

601132L Set di 4 cavi a filo

6111944 Adattatori per cavi a filo (cod 601132L) per usare elettrodi a Snap (12 Pezzi)

690001 Guscio protettivo per Chattanooga® Physio, Theta e Rehab

Manuale utente e guida pratica su CD/USB

Guida all'avvio rapido + libretto avvertenze

Libretto posizionamento elettrodi

Gel conduttivo

980020 Penna ricerca punti motori

680055 Borsa da trasporto per modelli Chattanooga® Theta e Rehab

949000 Gancio per cintura per elettrostimolazione a filo Chattanooga®

42204 Elettrodi Dura Stick® Plus snap 5x5 cm (4 pezzi)

42203 Elettrodi Dura Stick® Plus doppio snap 5x10 cm (2 pezzi)

#### ACCESSORI OPZIONALI

6601160 Cavo Mi-sensor (1 pezzo)

690001 Guscio protettivo per Chattanooga® Physio, Theta e Rehab

#### SPECIFICHE TECNICHE

Canali: 4

Intensità massima impulso: 120 mA

Incrementi intensità impulsi: 0,25 mA

Ampiezza impulso: 30-400 µs

Frequenza impulso: 1-150 Hz

Dispositivo medico: Classe IIa

Protezione elettrica: IP22

Conforme ai test di sicurezza: IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, IEC 60601-2-10

Batteria 941213: Nichel-metalidrato (NiMH) 4,8 V 2000 mA/h

Dimensioni (L x P x A): 138 x 95 x 33mm

Peso: 300 g incl. batteria

## REHAB

FRS 479.-



### CARATTERISTICHE

REHAB è uno stimolatore a 4 canali pensato per fisioterapisti e cliniche riabilitative che necessitano di un utilizzo standard dell'elettrostimolazione. Permette con semplici programmi di gestire il dolore, trattare i disturbi vascolari e stimolare i muscoli, rispondendo alle principali necessità dei professionisti.

Configurazione dei programmi: Standard (22 programmi)

#### Programmi

- Configurazione dei programmi Standard, che comprende: Riabilitazione I, Antalgico I, Vascolare e Preparazione fisica I.

#### Skip

- Gestisce la durata della sessione e passa direttamente alla fase successiva (recupero) quando necessario.

#### Muscle Intelligence Technology

- Tecnologia Mi integrata su tutti i 4 canali. (cavo Mi Sensor non incluso)

#### 2+2 Canali oppure 2+TENS

- Permette di scegliere un programma per i canali 1 e 2 e selezionarne un altro dalla lista dei programmi (funzione 2+2) per i canali 3 e 4. Ciò consente di trattare due diverse parti del corpo, due pazienti in contemporanea o combinare TENS e NMES in un unico trattamento.

#### Penna punto motore

- Questo utile strumento, incluso nel kit assieme all'apposito programma, aiuta a trovare il posizionamento ottimale dell'elettrodo.

#### FORMA ONDA



- Bifase simmetrica compensata al 100%

#### GARANZIA

3 anni: Kit Chattanooga® Rehab, batterie escluse

NB: per ulteriori informazioni fare riferimento al manuale d'uso.





### CARATTERISTICHE

THETA è uno stimolatore a 4 canali pensato per il trattamento di protocolli riabilitativi sia standard (Antalgico, NMES) che specifici, soprattutto quando sono richieste co-contrazioni e contrazioni indotte. Il dispositivo permette di seguire protocolli neurologici (Spasticità, Piede emiplegico, Agonista-Antagonista) ed è adatto per patologie specifiche come il trattamento post-operatorio del LCA. Configurazione dei programmi: Full (63 programmi)

#### Programmi

- Configurazione dei programmi Full, che comprende: Riabilitazione I e II, Antalgico I e II, Vascolare, Riabilitazione neurologica e Preparazione fisica I e II.

#### Muscle Intelligence Technology

- Le funzioni Mi sono disponibili su tutti i 4 canali:  
Mi-Scan, Mi-Tens, Mi-Range, Mi- Action.  
(2 cavi Mi-Sensor inclusi)

#### 2+2 Canali oppure 2+TENS

- Permette di scegliere un programma per i canali 1 e 2 e selezionarne un altro dalla lista dei programmi (funzione 2+2) per i canali 3 e 4. Ciò consente di trattare due diverse parti del corpo, due pazienti in contemporanea o combinare TENS e NMES in un unico trattamento.

#### Funzione Trigger

- Avvia una fase di lavoro volontario laddove richiesta dai protocolli (piede emiplegico, spasticità).

#### Skip

- Gestisce la durata della sessione e passa direttamente alla fase successiva (recupero) quando necessario.

#### Penna punto motore

- Questo utile strumento, incluso nel kit assieme all'apposito programma, aiuta a trovare il posizionamento ottimale dell'elettrodo.

#### Programmabilità

- È possibile creare e personalizzare i programmi, in base ai parametri specifici del paziente.

#### Autonomia e ricarica veloce

- Autonomia giornaliera; con il caricatore incluso nel kit un ciclo completo di ricarica dura al massimo 2h30.

#### FORMA ONDA



- Bifase simmetrica compensata al 100%

#### GARANZIA

3 anni: Kit Chattanooga® Theta, batterie escluse

NB: per ulteriori informazioni fare riferimento al manuale d'uso.

### INFORMAZIONI PER L'ORDINE

#### CODICE DESCRIZIONE

#### CHATTANOOGA® THETA

2534810 Kit Chattanooga® Theta

#### ACCESSORI INCLUSI

683010	Caricabatterie rapido
941213	Batteria
601132L	Set di 4 cavi a filo
6111944	Adattatori per cavi a filo (cod 601132L) per usare elettrodi a Snap (12 Pezzi)
6601160	Cavo Mi-Sensor (2 pezzi)
690001	Guscio protettivo
	Manuale utente e guida pratica su CD/USB
	Guida all'avvio rapido + libretto avvertenze
	Libretto posizionamento elettrodi
	Gel conduttivo
980020	Penna ricerca punti motori
680055	Borsa da trasporto per modelli Chattanooga® Theta e Rehab
949000	Gancio per cintura per elettrostimolazione a filo Chattanooga®
42204	Elettrodi Dura Stick® Plus snap 5x5 cm (4 pezzi)
42203	Elettrodi Dura Stick® Plus doppio snap 5x10 cm (2 pezzi)

#### ACCESSORI OPZIONALI

6601160	Cavo Mi-sensor (1 pezzo)
690001	Guscio protettivo per Chattanooga® Physio, Theta e Rehab

### SPECIFICHE TECNICHE

Canali:	4
Intensità massima impulso:	120 mA
Incrementi intensità impulsi:	0,25 mA
Ampiezza impulso:	30-400 µs
Frequenza impulso:	1-150 Hz
Classe di sicurezza elettrica:	Classe IIa
Protezione elettrica:	IP22
Test di sicurezza:	IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, IEC 60601-2-10
Batteria 941213:	Nichel-metalidrato (NiMH) 4,8 V 2000 mA/h
Dimensioni (L x P x A):	138 x 95 x 33mm
Peso:	300 g inc. batteria



## INFORMAZIONI PER L'ORDINE

### CODICE DESCRIZIONE

#### CHATTANOOGA® PHYSIO

2535110 Kit Chattanooga® Physio

#### ACCESSORI INCLUSI

683010	Caricabatterie rapido
941213	Batteria
601132L	Set di 4 cavi a filo
6111944	Adattatori per cavi a filo (cod 601132L) per usare elettrodi a Snap (12 Pezzi)
6601160	Cavo Mi-Sensor (4 pezzi)
690001	Guscio protettivo
602110	Set di elettrodi ultra-flessibili per programma denervato
642110	Set di elettrodi (2 piccoli, 2 medi, 2 grandi)
	Manuale utente e guida pratica su CD/USB
	Guida all'avvio rapido + libretto avvertenze
	Libretto posizionamento elettrodi
	Gel conduttivo
980020	Penna ricerca punti motori
680054	Valigetta per Physio
949000	Gancio per cintura per elettrostimolazione a filo Chattanooga®
42204	Elettrodi Dura Stick® Plus snap 5x5 cm (4 pezzi)
42203	Elettrodi Dura Stick® Plus doppio snap 5x10 cm (2 pezzi)

#### ACCESSORI OPZIONALI

6601160	Cavo Mi-sensor (1 pezzo)
690001	Guscio protettivo per Chattanooga® Physio, Theta e Rehab

#### SPECIFICHE TECNICHE

Canali:	4
Intensità massima impulso:	120 mA • 30 mA (Denervato) 20 mA (Iperidrosi)
Incrementi intensità impulsi:	0,25 mA • 0,125 mA (Iperidrosi)
Ampiezza impulso:	30-400 µs • 10-100 µs (Denervato) 150 µs (Iperidrosi)
Frequenza impulso:	1-150 Hz • 1/30-10 Hz (Denervato) 100 Hz (Iperidrosi)
Classe di sicurezza elettrica:	Classe IIa
Protezione elettrica:	IP22
Test di sicurezza:	IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, IEC 60601-2-10
Batteria 941213:	Nichel-metalidrato (NiMH) 4,8 V 2000 mA/h

## PHYSIO

Frs 979.-



#### Programmi

- Configurazione dei programmi Optimum, che comprende: Riabilitazione I e II, Antalgico I e II, Vascolare, Riabilitazione neurologica, Preparazione fisica I e II, Incontinenza, Muscolo denervato e Corrente diretta (Iperidrosi ed Edema).

#### Muscle Intelligence Technology

- Le funzioni Mi disponibili su tutti i 4 canali: Mi-Scan, Mi-Tens, Mi-Range, Mi-Action. (4 cavi Mi-Sensor inclusi)

#### 2+2 Canali oppure 2+TENS

- Permette di scegliere un programma per i canali 1 e 2 e selezionarne un altro dalla lista dei programmi (funzione 2+2) per i canali 3 e 4. Ciò consente di trattare due diverse parti del corpo, due pazienti in contemporanea o combinare TENS e NMES in un unico trattamento.

#### Funzione Trigger

- Avvia una fase di lavoro volontario laddove richiesta dai protocolli (piede emiplegico, spasticità).

#### Ricerca automatica della Rampa per la Denervazione Parziale

- Physio è l'unico dispositivo che calcola automaticamente la rampa più efficace per la Denervazione Parziale, quando solo i muscoli denervati necessitano di stimolazione.

#### SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni (L x P x A):	138 x 95 x 33mm
Peso:	300 g incl. batteria

#### CARATTERISTICHE

PHYSIO è uno stimolatore completo a 4 canali pensato per tutte le indicazioni elettroterapiche: TENS/NMES, Neurologia, LCA, Denervato, Iontoforesi, Iperidrosi, Urologia e Prevenzione dell'edema. Configurazione dei programmi: Optimum (74 programmi)

#### Skip

- Gestisce la durata della sessione e passa direttamente alla fase successiva (recupero) quando necessario.

#### Penna punto motore

- Questo utile strumento, incluso nel kit assieme all'apposito programma, aiuta a trovare il posizionamento ottimale dell'elettrodo.

#### Programmabilità

- È possibile creare e personalizzare i programmi, in base ai parametri specifici del paziente.

#### Autonomia e ricarica veloce

- Autonomia giornaliera; con il caricatore incluso nel kit un ciclo completo di ricarica dura al massimo 2h30.

#### FORMA ONDA



- Bifase simmetrica compensata al 100%



#### MONOFASE

- Continua
- Programmata a cicli
- Rettangolare pulsata
- Triangolare pulsata
- Sovratensione momentanea



- Corrente Galvanica Diretta

#### GARANZIA

3 anni: Kit Chattanooga® Physio, batterie escluse

NB: per ulteriori informazioni fare riferimento al manuale d'uso.



## ÉLECTRODES (FABRICATION IDENTIQUE AUX ELECTRODES COMPLEX PERFORMANCE)

CHATTANOOGA®

### ELETTRODI A FILO - DURA-STICK® PLUS A FILO

	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREZZO
 42219	42219	Ø 32 mm - (x 4)	9.90
 42197	42197	Ø 50 mm - (x 4)	13.90
 42199	42199	50 x 90 mm - (x 4)	19.90
 42198	42198	50 x 50 mm - (x 4)	13.90
 42200	42200	50 x 100 mm (2 sorties) - (x 2)	13.90

CHATTANOOGA®

### ELETTRODI A BOTTONE - DURA-STICK® PLUS BOTTONE

	CODICE ARTICOL	DESCRIZIONE	PREZZO
 42204	42204	50 x 50 mm - (x 4)	13.90
 42203	42203	50 x 100 mm - 1 Snap - (x 2)	13.90
 42223	42203	50 x 100 mm - 2 Snaps - (x 2)	13.90



602048

Gel

9.90



980026

Penna ricerca punti motori+ flacone gel 100 ml

29.90

## BATTERIES

941213



<b>941100</b>	<b>75.00</b>	Batteria (modèles Micro / Micro+) / Complex 2 / Theta Stim / Mi-Theta Pro / Complex Sport / Complex Fitness / Sport 300 / Sport 400 / Sport 500 / Medi Complex)
<b>941210</b>	<b>49.00</b>	Batteria Complex Sport (modèles Energy / Sport Elite / Full Fitness / Fit / Runner / Performance / Mi-Sport / Mi-Fitness / One / Vitality / SP2.0 / SP4.0 / Fit 1.0)
<b>941213</b>	<b>75.00</b>	Batteria Haute énergie Médical (modèles Rehab / Theta / Physio / Rehab 400 / Theta 500 / Physio 5 / Mi-Theta 600 / Complex 3)



CHATTANOOGA®

## TENS CINTURA

CHF 79,80

COLLEGAMENTO CINTURA E TENS



- LOMBALGIA CRONICA
- IDEALE PER IL MONITORAGGIO DEL TRATTAMENTO A DOMICILIO
- COMPATIBILE CON QUALSIASI DISPOSITIVO DI ELETTRO- STIMOLAZIONE TENS CON CONNETTORE UNIVERSALE MASCHIO DA 2 MM TIPO CEFAR (R)TENS

### CARATTERISTICHE

#### CONFORT

- Cintura sagomata e leggera, effetto "seconda pelle" tipo PoroStrap™ DonJoy®
- Tessuto traforato traspirante per un comfort ottimale durante l'uso
- Pettorina ergonomica per un comfort ottimale sia da seduti che in piedi

#### ACCOPIAMENTO TENS

- Da indossare a contatto con la pelle durante l'uso del TENS
- La tasca laterale consente un facile accesso al dispositivo e una modalità mani libere durante l'utilizzo
- I cavi con spina a banana passano nella cintura per raggiungere gli elettrodi posizionati a livello della zona lombare
- Elettrodi riposizionabili e autoadesivi su entrambi i lati
- Fornito con connettori ed elettrodi (senza Cefar®TENS)

#### CONTIENE

- 4 stecche posteriori semirigide per stabilizzare la zona lombare e correggere la lordosi
- 2 stecche anteriori flessibili per rafforzare il sostegno addominale
- Cinghie di richiamo posturale per regolare il livello di contenimento
- Cinghie di richiamo con passanti per le dita per facilitare la messa in posizione
- Chiusura frontale con passanti per facilitare la regolazione

#### MANUTENZIONE

- Lavabile a mano e asciugabile all'aria aperta a causa dei componenti elettronici (cavi)

#### DIMENSIONI

- Modello misto
- Altezza dorsale : 26 cm
- Disponibile in 56 misure (de XS à XL)

#### GARANZIA 6 MESI .



### INFORMATIONS DE COMMANDE

#### 82-0275

#### TENS BELT

82-0275-1	H.26 cm - Taille XS : 56-68 cm
82-0275-2	H.26 cm - Taille S : 68-82 cm
82-0275-3	H.26 cm - Taille M : 82-98 cm
82-0275-4	H.26 cm - Taille L : 98-116 cm
82-0275-5	H.26 cm - Taille XL : 116-136 cm

#### ACCESSOIRES STANDARDS INCLUS

#### 199598V

Elettrodi Dura-Stick® Plus  
Stimgel quadrati doppio lato  
50 x 50 mm - (x 4)

**Cintura Chatanooga Cefar TENS**  
Rimborsato dall'assicurazione Lamal CHF  
79.80 nu. pos. EMAP: 05.14.01.00.1



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra



📺 Découvrez la vidéo  
de mise en place de la ceinture  
Tens Belt Chattanooga®



## INFORMAZIONE PER L'ORDINE

CODICE 2075 CEFAR TENS

### ACCESSORI INCLUSI

42198	Elettrodi Dura-Stick Plus a filo 5x5 cm (4 pezzi)
2001	Caricatore rapido
1990	Set di 2 cavi
2049	Custodia di trasporto
2023	Tour de cou et clip
2037	Clip cintura

### ACCESSORI OPZIONALI

A12.907	Cavo biforcuto Y rosso
A12.908	Cavo biforcuto Y nero

## SPECIFICHE TECNICHE

Numero di canali:	2
Numero di programmi:	10 preimpostati 5 programmabili
Corrente costante :	Fino a una resistenza max di 1500 Ohm/canal
Ampiezza massima :	100 mA
Incrementi intensità impulsi :	Minimo 0,5 mA
Durata/ampiezza max di impulsi :	300 µ secondes
Larghezza di impulsi :	60 à 400 µ secondes
Fonte di alimentazione :	Batterie intégrée rechargeable Lithium Polymère
Dimensioni (LxPx):	132 x 60 x 24 mm
Peso :	156 g

## FORMA ONDA



- Bifase asimmetrica compensata al 100%

# CHATTANOOGA TENS

## STIMOLATORE ANTALGICO 2 CANALI

Frs 144.-



10 programmi preimpostati



3 anni Garanzia




fate 3 programmi simultaneamente



Batteria ricaricabile Lithium Polymère



Cavi Y fino a utilizzo di 8 elettrodi

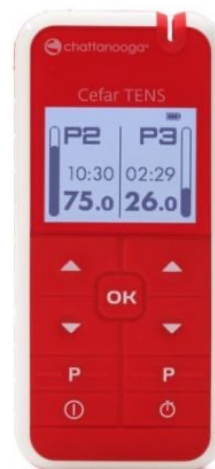

- **IDEALE PER CONTINUARE LA RIEDUCAZIONE A DOMICILIO**
- **1+1: COMBinate 2 PROGRAMMI DIFFERENTI SIMULTANEAMENTE**
- **BATTERIA LITHIUM RICARICABILE**

## CARATTERISTICHE

Le Cefar® TENS offre dei programmi TENS per il trattamento di diversi tipi di dolore. Comprende 10 programmi di trattamento preselezionati, tra cui TENS convenzionale BURST, TENS modulato (larghezza dell'impulso), frequenza mista, Cefar® Flow TENS e stimolazione per il trattamento della nausea.

Le Cefar® TENS peut être utilisé en mode électro-acupuncture.

### 2 CANALI INDIPENDENTI

Eseguite un trattamento combinato contemporaneamente 2 programmi diversi

### PERSONALIZZAZIONE

5 posizioni libere che consentono di creare programmi personalizzati

### VANTAGGI

Collo: lo stimolatore è dotato di un collare staccabile e di una clip da cintura che ne facilitano l'uso

### CAVI BIFORCATI

Consentono di utilizzare fino a 8 elettrodi con un unico apparecchio, per patologie con localizzazioni dolorose in più zone del corpo: fibromealgie, sindrome di Ehlers, Danlos,.....

## GARANZIA 3 ANNI

## Chattanooga Cefar TENS

Rimborsato dall'Assicurazione Lamal

CHF 144.00

num. pos. Emap: 09.02.01.00.1



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra



## INFORMAZIONI PER L'ORDINE

### CODICE DESCRIZIONE

#### CEFAR PERISTIM PRO

1480-EXP Cefar Peristim Pro

#### ACCESSORI INCLUSI

1240 Cavi bipolari (2 pezzi)  
1566 Manuale utente  
1559 Custodia rigida Cefar  
1495 Cordino e gancio per cintura Cefar  
1551 Batterie alcaline AA 1,5 V (2 pezzi)  
42198 Elettrodi Dura-Stick Plus a filo 5x5 cm (4 pezzi)

#### ACCESSORI

114.242+ Sonda anale Saint Cloud con connettori a spinotto 2x2 mm  
114.610EXP Sonda vaginale Saint-Cloud Plus con connettori a spinotto 2x2 mm  
1570 Caricabatterie 1,2 V

#### SPECIFICHE TECNICHE

Numero di canali: 2  
Numero di programmi: 9 preimpostati  
3 programmabili  
Corrente costante: Fino a una resistenza di max 1000 Ohm/canale  
Ampiezza massima impulso: 99,5 mA  
Incrementi intensità impulsi: Minimo di 0,5 mA  
Ampiezza impulso: 300 µs  
Frequenza impulso: 1-120 Hz  
Fonte di alimentazione: 2 batterie alcaline AA da 1,5 V  
Classe di sicurezza elettrica: Classe II, tipo BF  
Test di sicurezza: IEC 60601-1, IEC 60101-1-2  
Dimensioni (L x P x A): 120 x 30 x 50 mm  
Peso: 180 g incl. batterie

#### FORMA ONDA



• Bifase simmetrica compensata al 100%

#### GARANZIA

2 anni: Cefar Peristim Pro

NB: per ulteriori informazioni fare riferimento al manuale d'uso.

## CEFAR PERISTIM PRO

FRS 144.-



### CEFAR PERISTIM PRO

#### Elettrostimolazione per il trattamento dell'incontinenza

Cefar Peristim Pro è dotato di 9 programmi preimpostati per trattare l'incontinenza da sforzo, l'incontinenza mista, l'incontinenza da urgenza, il dolore correlato a disturbi urinari (per es. cistiti) e per la stimolazione del nervo sacrale o dei punti dell'agopuntura per il trattamento dell'incontinenza da urgenza.

#### CARATTERISTICHE

- Stimolazione tramite sonda vaginale e/o anale o elettrodi di superficie
- Programmabile: Cefar Peristim Pro consente di aggiungere 3 programmi personalizzati
- Schermo retroilluminato: Cefar Peristim Pro è dotato di un ampio schermo e la retroilluminazione ne aumenta la leggibilità, anche in ambienti poco luminosi.
- Altri vantaggi: funzione di pausa, blocco del programma, blocco tasti, conformità, autocontrollo

#### Sonda vaginale Saint-Cloud ♦PLUS



#### Sonda anale Saint-Cloud♦



**Peristim Pro Chattanooga**  
Rimborsato dall'Assicurazione  
Lamal CHF 144.00  
num. pos. Emap: 09.02.01.00.1



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra



## SONDA VAGINALE SAINT-CLOUD PLUS

FRS 31.50

### ACCESSORI OPZIONALI

Cavo adattatore Din  
3 poli maschi

114.610 EXP



### CARATTERISTICHE

Curvatura anatomica che rispetta la morfologia e la fisiologia vaginale per migliorare il comfort. Grandi elettrodi ventro-laterali per una migliore superficie di contatto. Collare di fissaggio rimovibile. Scollegamento dei cavi che favorisce l'immersione completa in un bagno disinfettante (tipo Stéránios). Connettori a 2 spine da 2 mm.

- Lunghezza 13 cm
- Diametro 2,5 cm
- CE 2797

**GARANZIA 3 MESI**

## SONDA VAGINALE SAINT-CLOUD CLASSIC

114.502+

FRS 20.00

### ACCESSORI OPZIONALI

A14.913

Cavo adattatore 2 poli femminili  
2 mm,  
per sonda DIN 3 poli maschi  
(114.502+, 114.110, 114.121, 114.302)

114.912

Cavo adattatore

4.90 TTC



CHATTANOOGA®



### CARATTERISTICHE

Strangolamento che migliora la tenuta nella vagina evitando l'espulsione durante le contrazioni. Doppie elettrodi ad anello per una stimolazione circolare su tutti i lati della parete vaginale. Estremità allungata della sonda che facilita la presa e la visualizzazione, sia durante la stimolazione che durante il biofeedback. Connessione DIN 3 attacchi.

- Lunghezza 13 cm
- Diametro 2,5 cm
- CE 2797

**GARANZIA 3 MESI**

**CHATTANOOGA®**

## SONDA ANALE SAINT-CLOUD

FRS 49.00



### CARATTERISTICHE

Doppio reclutamento muscolare (pubo-rettale e sfintere striato anale) assicurato da un anello situato a livello dell'angolo ano-rettale (angolo 110°).

Linguetta di fissaggio rimovibile che consente al paziente di tenere la sonda con una sola mano, evitando così che fuoriesca durante la seduta. Connettori a 2 poli da 2 mm o DIN a 3 poli.

- Lunghezza 11 cm
- Diametro 1,3 cm
- CE 2797

**GARANZIA 3 MESI**

## INFORMAZIONI PER L'ORDINE

## CODICE DESCRIZIONE

## CHATT TAPE

5001 Beige 1 scatola da 12 rotoli

5002 Blu 1 scatola da 12 rotoli

5003 Nero 1 scatola da 12 rotoli

5004 Rosa 1 scatola da 12 rotoli

Ogni rotolo è confezionato con scatola singola

Misura del Chatt Tape: Larghezza 5 cm  
Lunghezza 500 cm

## CHATT TAPE

Chatt Tape è un nastro chinesiológico ipoallergenico realizzato in cotone di altissima qualità. Chatt Tape lascia respirare la pelle, impedisce la formazione di sudore e aiuta a prevenire eruzioni cutanee.

L'elasticità del nastro garantisce un adattamento ottimale a qualsiasi parte del corpo senza limitare i movimenti.

L'adesivo acrilico morbido e termosensibile evita le irritazioni cutanee e le tensioni a carico della pelle.

Chatt Tape può essere utilizzato su specifiche parti del corpo per potenziare la circolazione sanguigna e linfatica e per ottenere un miglior recupero naturale e un ripristino dei tessuti molli. Si deve tenere presente che l'applicazione del nastro sulla pelle può alterare l'attivazione e la contrazione del muscolo.

Il nastro Chatt Tape è un Dispositivo Medico Classe I e soddisfa standard qualitativi molto elevati, è sicuro e non contiene lattice.

## CARATTERISTICHE

- Sostiene i muscoli
- Disostruisce il flusso di fluidi corporei
- Corregge problemi alle articolazioni e migliora la propriocezione
- Allevia i dolori muscoloscheletrici
- Migliora la struttura dell'epidermide

